

NOUVEAUTÉ 2022

ID^eclean

**Le 1^{er} décontaminateur
de surface connecté
qui s'intègre à votre
Unit.**

**Un concentré
de technologie :
COMPACT,
ESTHÉTIQUE
et EFFICACE !**

www.idi-dental.com

**VISIBLE SUR LE STAND
ADF 3M21**

ID@clean

DÉCONTAMINATEUR DE SURFACE

DISTRIBUTEUR EXCLUSIF IDI

**BACTÉRICIDE
FONGICIDE
VIRUCIDE**

**Votre espace de travail est
décontaminé à 99,9%*, y compris
dans les zones difficiles d'accès.**



*Certificat Norme : NF EN 17272 délivré par le Laboratoire FONDEREPHAR


**VOTRE ALLIÉ DANS LA LUTTE CONTRE LA COVID MAIS
ÉGALEMENT TOUTES LES BACTÉRIES,
VIRUS, VIH ET GERMES.**

LE MOINS CHER DU MARCHÉ



CONNECTÉ - TECHNOLOGIE CLOUD

- Pilotage et PROGRAMMATION À DISTANCE, via une application mobile.
- Fonctionne la nuit, fauteuil éteint pour un GAIN DE TEMPS.

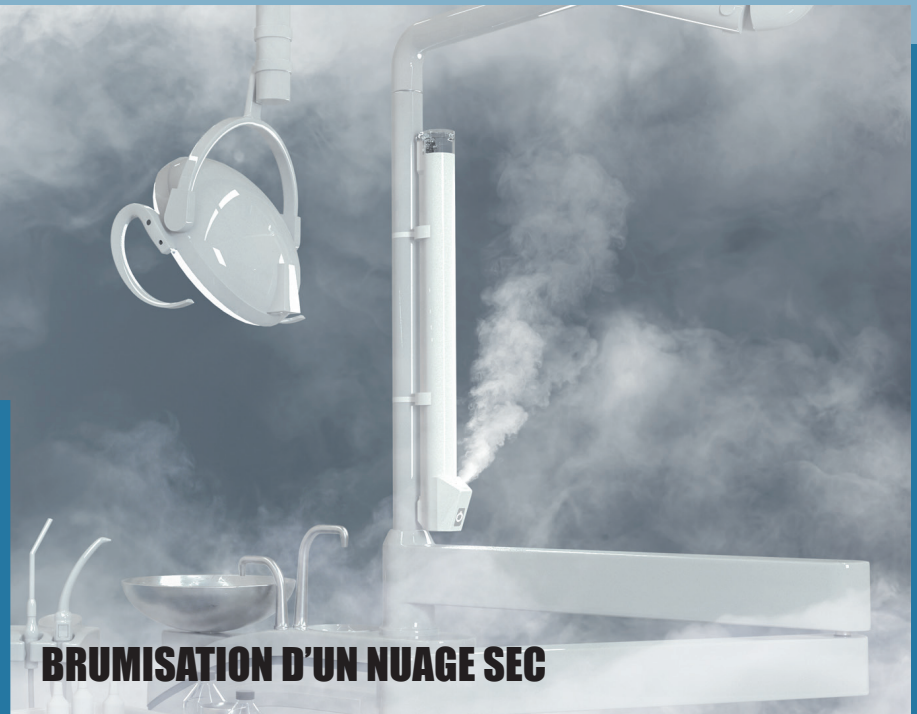

BRUMISATION D'UN NUAGE SEC

Vous avez l'assurance que la pièce est désinfectée dans les moindres recoins, MÊME LÀ OÙ L'ASSISTANTE NE PEUT PAS ALLER !

Le nuage sec rentre dans les tiroirs et désinfecte même les instruments qui y sont stockés.

Conçu, développé et fabriqué en France Brevet international

DISCRET - il se fond dans le décor en se fixant directement sur le bras du scialytique du fauteuil dentaire et se raccorde au compresseur de ce dernier.

SILENCIEUX - il n'émet aucune nuisance sonore.

Spécifités techniques :

- L'**ID@clean** exploite le réseau d'air comprimé déjà présent dans le cabinet pour diffuser le biocide.
- Batterie intégrée
- Bouton Marche/Arrêt
- Buse ultrasonique = brouillard sec, petites particules, très pénétrantes.

3 modes de fonctionnement :

- veille
- mode manuel
- Programmé

- Efficacité optimale après un cycle complet (15 minutes de diffusion suivie de 45 minutes de pose).
- Doit être utilisé **UNIQUEMENT** avec le produit certifié.

Réponds aux normes CE en vigueur.

Garantie 1 an, sous réserve d'une utilisation et d'un entretien adéquats.



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL
23/25 rue Emile ZOLA
93100 Montreuil FRANCE

Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48
Email : info@idi-dental.com



www.idi-dental.com