



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL  
*30 ans* D'IMPLANTOLOGIE

**TURBOdrill®**

**1<sup>ère</sup> Mondiale**



Irrigation «**INTENSE**»



**INNOVATION IDI**

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)



## forer différemment !

Le foret **TURBOdrill®** est une innovation de la société **IDI – IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL**. Il propose une nouvelle manière de forer, grâce à sa butée de sécurité à pales.




Maîtriser tous les paramètres de forage :  
*sécurité, irrigation,  
température & vitesse.*

IMPLANT  
DIFFUSION  
INTERNATIONAL

**Sécurité** - Butée Titane



**Innovation** - Butée à pales

**Efficacité** - 4 lames dentelées

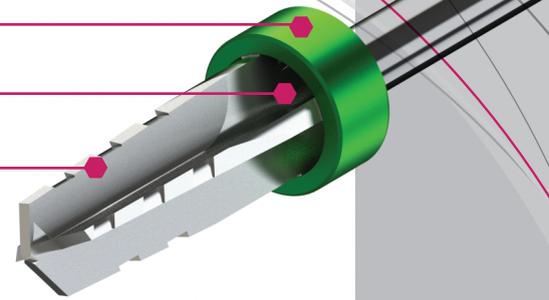

## Une irrigation abondante jusqu'à la pointe.

Doté d'une butée « creuse » concentrant et guidant le liquide d'irrigation le long des lames du foret. Plus la vitesse de rotation du foret est élevée, plus le liquide est entraîné vers la pointe.

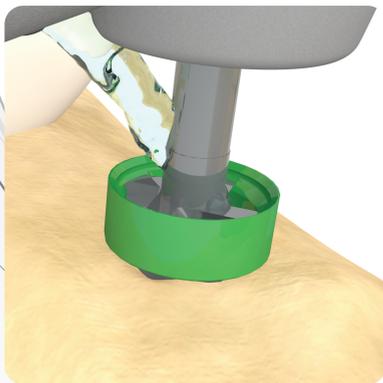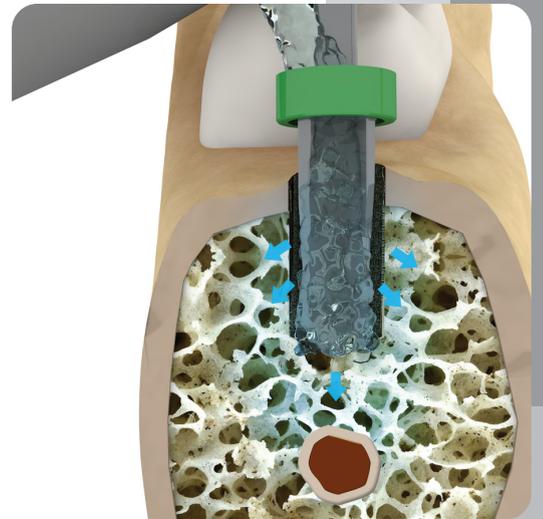

**Optimisation de l'irrigation.** Forage jusqu'à 1200 tours/min **sans échauffement**. Le liquide est entraîné par les pales dans la cavité de l'os pour **un refroidissement optimal**.

**Foret cylindro-conique,**  
disponible en 4 longueurs :  
8, 10, 12 et 15  
et en 3 diamètres :  
3,5, 4,2 et 5,2.



## IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Concepteur et Fabricant d'implants dentaires français

Depuis près de **30 ans**, **IDI** met tout en œuvre pour vous proposer des produits innovants de qualité, **pensés et fabriqués en France**, et répondant à l'ensemble des normes et certifications, nationales et internationales.

IDI – **IMPLANTS** DIFFUSION INTERNATIONAL  
23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil - France  
Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48 – Fax : +33 (0)1 48 70 44 58  
Email : [info@idi-dental.com](mailto:info@idi-dental.com)

La société IDI est certifiée selon la norme ISO 13485 : 2016. Les produits dont IDI est le fabricant sont marqués CE1649 pour les dispositifs médicaux de classes IIa et IIb et sont marqués CE par auto-certification pour les dispositifs de classe I. Les dispositifs médicaux répondent aux exigences essentielles de la Directive 93/42/CEE. Produits non pris en charge par la CPAM. Lire attentivement la notice avant utilisation d'un produit IDI.

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)