



IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL  
*30 ans* D'IMPLANTOLOGIE

**TURBOdrill®**

**1<sup>ère</sup> Mondiale**



Irrigation «**INTENSE**»




**INNOVATION IDI 2017**

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)




## forer différemment !

Le foret **TURBOdrill®** est une innovation de la société **IDI – IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL**. Il propose une nouvelle manière de forer, grâce à sa butée de sécurité à pales.

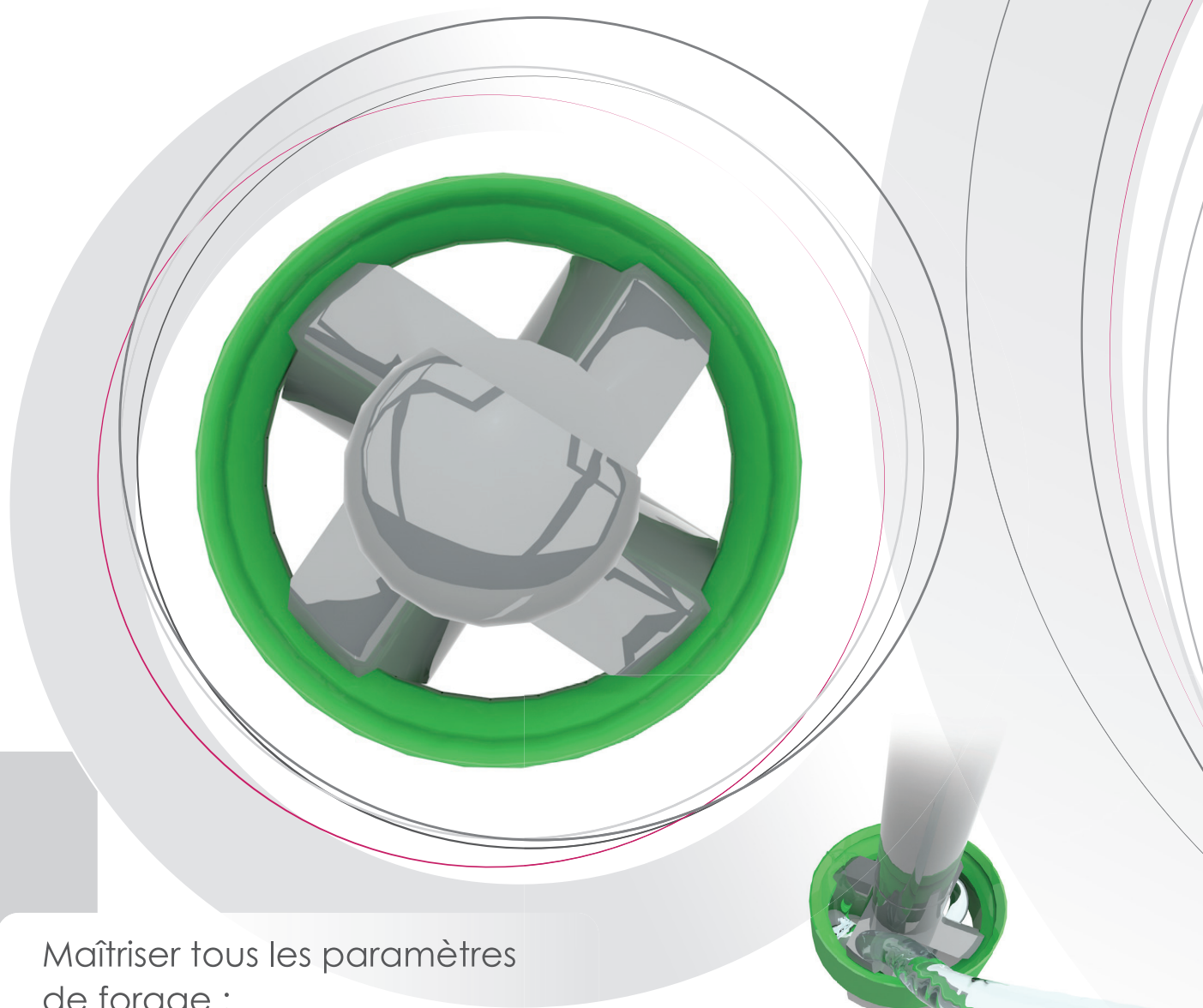



Maîtriser tous les paramètres de forage :  
sécurité, irrigation,  
température & vitesse.

- Sécurité** - Butée Titane
- Innovation** - Butée à pales
- Efficacité** - 4 lames dentelées

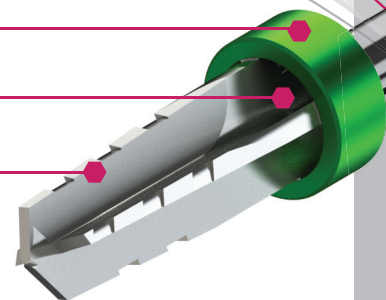

## Une irrigation abondante jusqu'à la pointe.

Doté d'une butée « creuse » concentrant et guidant le liquide d'irrigation le long des lames du foret. Plus la vitesse de rotation du foret est élevée, plus le liquide est entraîné vers la pointe.

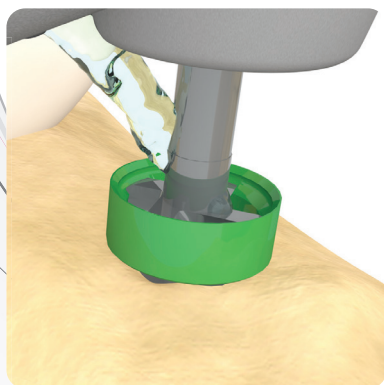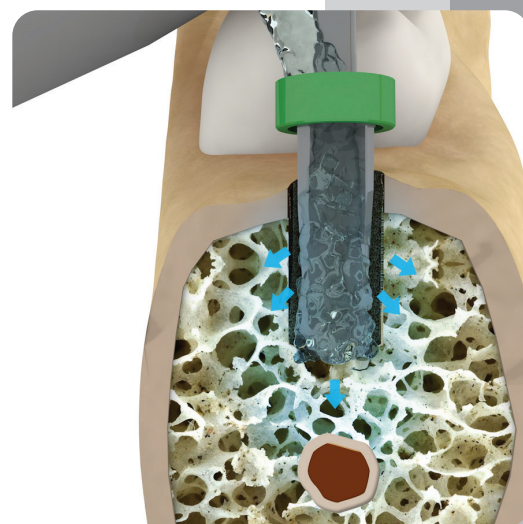

**Optimisation de l'irrigation.** Forage jusqu'à 1200 tours/min **sans échauffement**. Le liquide est entraîné par les pales dans la cavité de l'os pour **un refroidissement optimal**.

**Foret cylindro-conique,**  
disponible en 4 longueurs :  
8, 10, 12 et 15  
et en 3 diamètres :  
3,6, 4,2 et 5,2.



## IMPLANTS DIFFUSION INTERNATIONAL

Concepteur et Fabricant d'implants dentaires français

Depuis près de **30 ans**, **IDI** met tout en œuvre pour vous proposer des produits innovants de qualité, **pensés et fabriqués en France**, et répondant à l'ensemble des normes et certifications, nationales et internationales.

IDI – **IMPLANTS** DIFFUSION INTERNATIONAL  
23/25 rue Émile Zola - 93100 Montreuil - France  
Tél. : +33 (0)1 48 70 70 48 – Fax : +33 (0)1 48 70 44 58

[www.idi-dental.com](http://www.idi-dental.com)